



STERN PODIA 

*Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo ed hanno il solo scopo di presentare il prodotto per la vendita, senza alcuna garanzia o impegno, da parte di SMD Stern Podia, circa l'esatta corrispondenza dell'immagine raffigurata con il prodotto reale
SMD Stern Podia non accetterà responsabilità per differenze in termini di colore o design che non siano dovute ad errori di produzione.*

Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS con finitura gofrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l'ossidazione rotante a 350° su cuscinetto a sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo, carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Tappezzeria, realizzata in PVC integrale 2 mm anallergico e autoestinguente e disponibile in versione mono o bicolore.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano a densità progressiva realizzati in stampo. Inserto interno allo schienale e alla seduta in acciaio

Braccioli coassiali con allineamento sincronizzato all'inclinazione dello schienale, al fine del costante mantenimento del parallelismo dei braccioli con la seduta in tutte le condizioni operative.

Funzione "SAFETY STOP" attivabile dal paziente e dall'operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione "lettino" con schienale, seduta, gambaiera/e e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale.



altezza minima del sedile: 510 mm
altezza massima del sedile: 890 mm
inclinazione delle gambiere: 90°
inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°) mediante attuatore elettrico
inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico
altezza massima dell'estremità della gambaiera: 1340 mm
Peso della poltrona: 110 kg
Carico nominale al sollevamento: 220 kg



Sollevamento verticale a pantografo
mediante attuatore elettrico

Pedale con sistema wireless.
Pulsanti per la gestione dei movimenti della poltrona ad attivazione Single Touch

- ↪ 3 posizioni operative memorizzabili
- ↪ Ritorno automatico alla posizione "0"



Modelli Arcadia disponibili:

3915620	ARCADIA con doppia gambiera meccanica (3 motori) Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema <u>Extra Slide (250 mm di escursione)</u>
----------------	--




ARCADIA è disponibile sia con la **GAMBIERA UNICA** che con la **DOPPIA** gamba

GAMBIERA UNICA



DOPPIA GAMBIERA



	<p align="center">MECCANICA</p> <p align="center">-</p> <p align="center">AGIRE SULLA LEVA DI METALLO PER ABBASSARE LE GAMBIERE</p>	<p align="center">MOTORIZZATA</p> <p align="center">-</p> <p align="center">AGIRE SUL PEDALE PER MUOVERE LE GAMBIERE</p>
<p>DOPPIA GAMBIERA</p>		
<p>GAMBIERA UNICA</p>	<p align="center">-</p>	

Le poltrone SMD Stern Podia permettono l'accesso sia frontale che laterale.

L'accesso laterale nella poltrona Arcadia è garantito dalla possibilità di sollevare i braccioli in modo semplice e intuitivo.



POLTRONE:

Dispositivi medici di Classe I



Struttura interamente in acciaio trattato contro l'ossidazione




Boccole in plastica autolubrificante

Schede elettroniche made in Italy



Base anti-ribaltamento

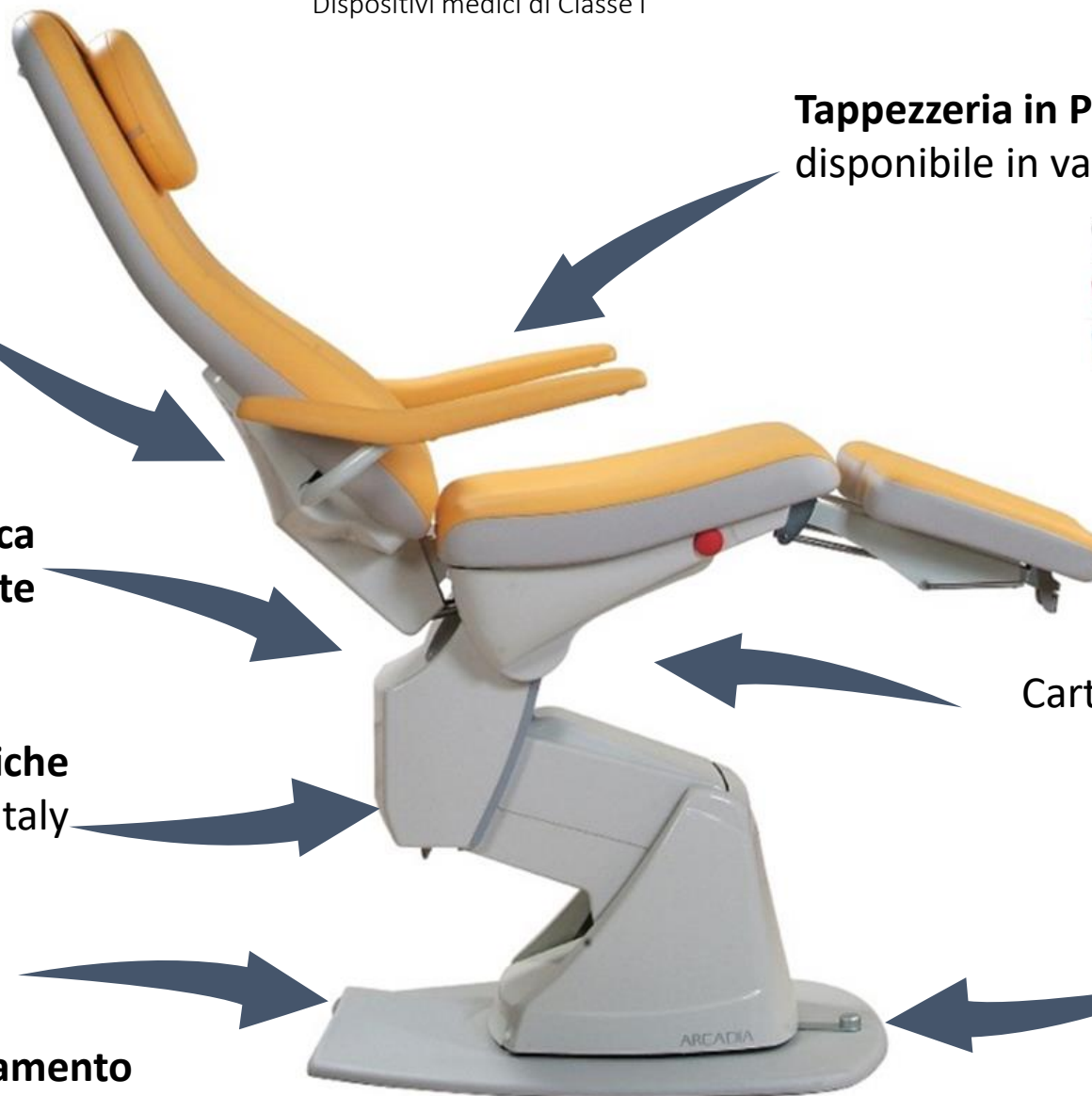

Tappezzeria in PVC 2 mm integrale disponibile in vari colori



Carterature in ABS+PMMA

Struttura rotante a 350°

PROXIMA**Wireless Single Touch Pedal:**

3 memories + return to 0 position
Electric brake system

ARCADIA**Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

PLEION X**Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

PLEION S**Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

LYRA**Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Altezza seduta:
min 46 cm / max 91 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 142

Possibilità tappezzeria bicolore

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Altezza seduta:
min 51 cm / max 89 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 134

Possibilità tappezzeria bicolore

Carico nominale al sollevamento
190 Kg

Altezza seduta:
min 54 cm / max 94 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 130

Possibilità tappezzeria bicolore

Carico nominale al sollevamento
160 Kg

Altezza seduta:
min 54 cm / max 94 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 130

**Possibilità tappezzeria bicolore
OPZIONALE**

Carico nominale al sollevamento
200 Kg

Altezza seduta:
min 48,5 cm / max 69 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 105

**Possibilità tappezzeria bicolore
OPZIONALE**

	PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Numero dei motori	Da 2 a 5	3	2	2	2
Movimenti	3 motorizzati o 2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	3 motorizzati	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 
Movimento verticale a pantografo 	X	X	X	X	X
Schiuma iniettata in uno stampo, spessore della seduta differenziato ergonomicamente. Insetto interno dello schienale e della seduta in acciaio.	X	X	-	-	-
Spessore costante di 4 cm di gomma piuma.	-	-	X	X	X
Rotazione 350° Freno elettrico a pedale 	X	-	-	-	-
Rotazione 350° Freno di rotazione ad effetto progressivo tramite leva a pedale. 	-	X	X	X	-
Sistema di Sicurezza attivabile dal paziente (bottoni rossi posti ai lati della seduta) 	X	X	X	X	-

	PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Braccioli montati direttamente sullo schienale per garantire un accesso laterale alla seduta della poltrona completamente libero da ostacoli.	X	X	-	-	-
Braccioli coassiali ad altezza variabile rispetto alla seduta, in sincronia con l'inclinazione dello schienale. 	X	X	-	-	-
Braccioli sollevabili, anche separatamente, in modo semplice e intuitivo. 	X	-	-	-	-
Braccioli entrambi abbattibili 	-	-	X	X	X
Extra Slide System: 35 cm 	X	-	-	-	-
Extra Slide System: 25 cm 	-	X	X	X	-

		PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Gambiere divaricabili con ampiezza angolare di 30°+30°, (ideale per la salita e discesa di pazienti anziani e con difficoltà di movimento)		X	X	X	X	X
Doppia gambiera manuale (movimentabile con molla a gas)		X	-	-	-	-
Doppia gambiera manuale		-	X	X	X	X
Doppia gambiera motorizzata		X	-	-	-	-
Gambiera unica motorizzata		X	-	-	-	-

Cortina in PVC




ASPI-COMP Motore d'aspirazione con braccio

Motore d'aspirazione ad induzione ASPI-COMP con carenatura insonorizzante in acciaio verniciato con polvere epossidica, silenziatore, interruttore generale, fusibili. Filtro con indicatore di saturazione incluso
Aria aspirata 60m³/h



Lampada SUN LED con braccio articolato e compensato

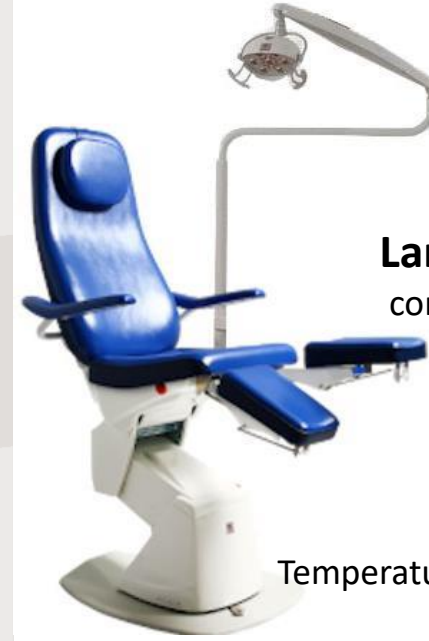

7 led da 3W
(utilizzati al 70%)
Temperatura del colore 6.300K
Alimentazione 24V
Assorbimento 15W complessivi

Accessori poltrone podologiche




**Kit 2 vaschette
per gambiere**

**Protezione gambiere in
tessuto lavabile**
(colore bianco)



Memory foam

Aggiunta di uno strato di schiuma memory
alla normale imbottitura della tappezzeria

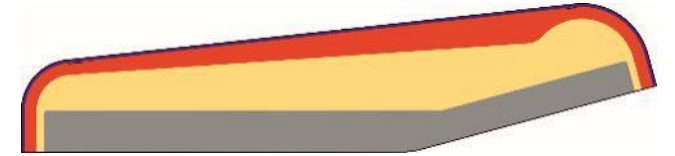

Accessori poltrone podologiche



STERN PODIA 



STERN PODIA 



S.M.D. Srl

Via Bruno Buozzi, 41 40057 CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
tel. +39 051766143 fax +39 051 766043 www.smdmed.com

STERN PODIA 

P.IVA IT 02195391202 C.F./Reg.Imprese BO 02195391202 REA n.419949 Capitale sociale euro 50.000 i.v.