



STERN PODIA 

*Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo ed hanno il solo scopo di presentare il prodotto per la vendita, senza alcuna garanzia o impegno, da parte di SMD Stern Podia, circa l'esatta corrispondenza dell'immagine raffigurata con il prodotto reale  
SMD Stern Podia non accetterà responsabilità per differenze in termini di colore o design che non siano dovute ad errori di produzione.*

Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS con finitura gofrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio verniciato a polvere.  
Carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza.

Tappezzeria, realizzata in PVC 2 mm integrale anallergico e autoestinguente.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano.  
Inserto interno allo schienale e alla seduta in legno

Braccioli abbattibili.

Appoggiatesta NON INCLUSO ma disponibile su richiesta.

Possibilità di raggiungere la **posizione "lettino"** con schienale, seduta, gambaiera/e e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale.



Sollevamento verticale a pantografo  
mediante attuatore elettrico



Pedale con cavo con pulsanti per la gestione dei movimenti della poltrona  
Pulsante dedicato per il ritorno alla posizione "0".

altezza minima del sedile: 485mm  
altezza massima del sedile: 690 mm  
inclinazione delle gambiere: 90°  
inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)  
inclinazione longitudinale della poltrona (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico  
altezza massima dell'estremità della gambaiera: 1050 mm  
Peso della poltrona: 110 kg  
Carico nominale al sollevamento: 200 kg

# LYRA

LYRA è sempre in configurazione ambidestra.

# Modelli Lyra disponibili:

<b>3919011</b>	Lyra con <b>doppia gambiera meccanica</b> (2 motori)  Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche
----------------	---



AGIRE SULLA LEVA DI METALLO PER ABBASSARE LE GAMBIERE

## Optional:

<b>3916010</b>	Appoggiatesta per LYRA
<b>3916030</b>	Tappetzeria in versione bicolore
<b>3919030</b>	Dispositivo di rotazione a 350° inserito nella base della poltrona, su cuscinetto a sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo

LYRA

Le poltrone SMD Stern Podia permettono l'accesso sia frontale che laterale.

L'accesso laterale nella poltrona Lyra è garantito dalla possibilità di abbattere e bloccare in posizione bassa i braccioli.



# POLTRONE:

Dispositivi medici di Classe I



**Struttura interamente in acciaio** trattato contro l'ossidazione




**Boccole in plastica autolubrificante**

**Schede elettroniche made in Italy**



**Base anti-ribaltamento**

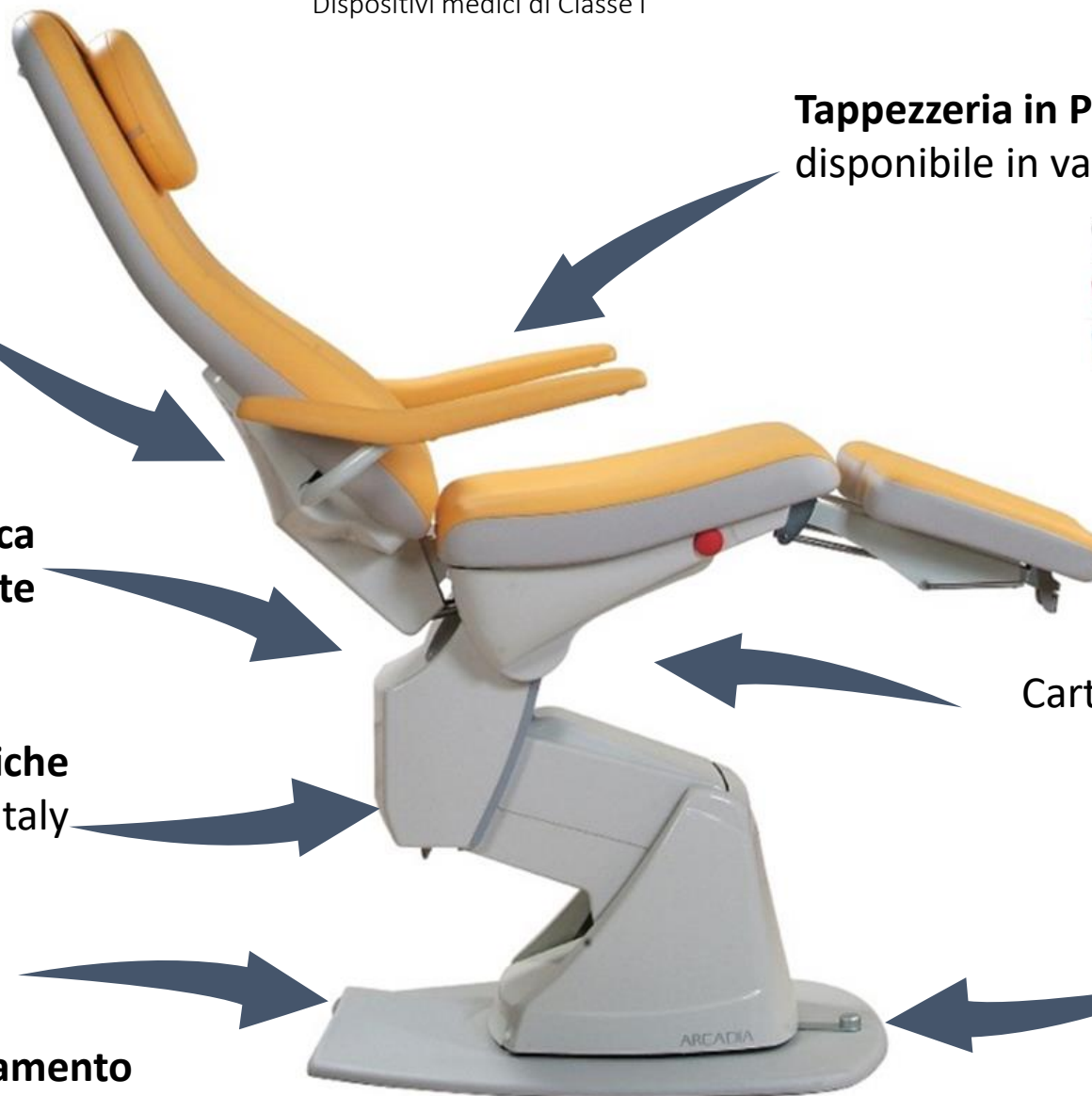

**Tappezzeria in PVC 2 mm integrale** disponibile in vari colori



**Carterature in ABS+PMMA**

**Struttura rotante a 350°**



**PROXIMA****Wireless Single Touch Pedal:**

3 memories + return to 0 position

**Electric brake system****ARCADIA****Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

**PLEION X****Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

**PLEION S****Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

**LYRA****Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

**Carico nominale al sollevamento**

220 Kg

**Carico nominale al sollevamento**

220 Kg

**Carico nominale al sollevamento**

190 Kg

**Carico nominale al sollevamento**

160 Kg

**Carico nominale al sollevamento**

200 Kg

**Altezza seduta:**

min 46 cm / max 91 cm

**Altezza seduta:**

min 51 cm / max 89 cm

**Altezza seduta:**

min 54 cm / max 94 cm

**Altezza seduta:**

min 54 cm / max 94 cm

**Altezza seduta:**

min 48,5 cm / max 69 cm

**Altezza massima dell'estremità  
della gamba: cm 142****Altezza massima dell'estremità  
della gamba: cm 134****Altezza massima dell'estremità  
della gamba: cm 130****Altezza massima dell'estremità  
della gamba: cm 130****Altezza massima dell'estremità  
della gamba: cm 105**

Possibilità tappezzeria bicolore

Possibilità tappezzeria bicolore

Possibilità tappezzeria bicolore

Possibilità tappezzeria bicolore  
**OPZIONALE**Possibilità tappezzeria bicolore  
**OPZIONALE**

	<b>PROXIMA</b>	<b>ARCADIA</b>	<b>PLEION X</b>	<b>PLEION S</b>	<b>LYRA</b>
<b>Numero dei motori</b>	Da 2 a 5	3	2	2	2
<b>Movimenti</b>	<b>3 motorizzati</b> o <b>2 motorizzati + 1 manuale (schienale)</b> 	<b>3 motorizzati</b> 	<b>2 motorizzati + 1 manuale (schienale)</b> 	<b>2 motorizzati + 1 manuale (schienale)</b> 	<b>2 motorizzati + 1 manuale (schienale)</b> 
<b>Movimento verticale a pantografo</b> 	X	X	X	X	X
<b>Schiuma iniettata in uno stampo, spessore della seduta differenziato ergonomicamente. Inserto interno dello schienale e della seduta in acciaio.</b>	X	X	-	-	-
<b>Spessore costante di 4 cm di gomma piuma.</b>	-	-	X	X	X
<b>Rotazione 350° Freno elettrico a pedale</b> 	X	-	-	-	-
<b>Rotazione 350° Freno di rotazione ad effetto progressivo tramite leva a pedale.</b> 	-	X	X	X	-
<b>Sistema di Sicurezza attivabile dal paziente (bottoni rossi posti ai lati della seduta)</b> 	X	X	X	X	-

		<b>PROXIMA</b>	<b>ARCADIA</b>	<b>PLEION X</b>	<b>PLEION S</b>	<b>LYRA</b>
<b>Braccioli montati direttamente sullo schienale per garantire un accesso laterale alla seduta della poltrona completamente libero da ostacoli.</b>		X	X	-	-	-
<b>Braccioli coassiali ad altezza variabile rispetto alla seduta, in sincronia con l'inclinazione dello schienale.</b>		X	X	-	-	-
<b>Braccioli sollevabili, anche separatamente, in modo semplice e intuitivo.</b>		X	-	-	-	-
<b>Braccioli entrambi abbattibili</b>		-	-	X	X	X
<b>Extra Slide System: 35 cm</b>		X	-	-	-	-
<b>Extra Slide System: 25 cm</b>		-	X	X	X	-



		<b>PROXIMA</b>	<b>ARCADIA</b>	<b>PLEION X</b>	<b>PLEION S</b>	<b>LYRA</b>
<b>Gambiere divaricabili con ampiezza angolare di 30°+30°,</b> (ideale per la salita e discesa di pazienti anziani e con difficoltà di movimento)		X	X	X	X	X
<b>Doppia gambiera manuale (movimentabile con molla a gas)</b>		X	-	-	-	-
<b>Doppia gambiera manuale</b>		-	X	X	X	X
<b>Doppia gambiera motorizzata</b>		X	-	-	-	-
<b>Gambiera unica motorizzata</b>		X	-	-	-	-




**Kit 2 vaschette  
per gambiere**

**Protezione gambiere in  
tessuto lavabile**  
(colore bianco)



**Memory foam**

Aggiunta di uno strato di schiuma memory  
alla normale imbottitura della tappezzeria

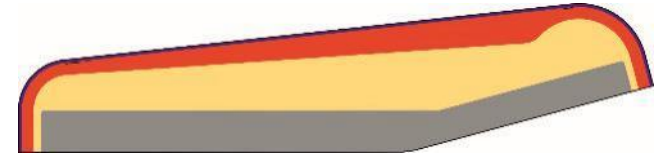

Accessori poltrone podologiche



STERN PODIA 



STERN PODIA 



**S.M.D. Srl**

Via Bruno Buozzi, 41 40057 CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)  
tel. +39 051766143 fax +39 051 766043 [www.smdmed.com](http://www.smdmed.com)

STERN PODIA 

P.IVA IT 02195391202 C.F./Reg.Imprese BO 02195391202 REA n.419949 Capitale sociale euro 50.000 i.v.