



STERN PODIA 

*Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo ed hanno il solo scopo di presentare il prodotto per la vendita, senza alcuna garanzia o impegno, da parte di SMD Stern Podia, circa l'esatta corrispondenza dell'immagine raffigurata con il prodotto reale
SMD Stern Podia non accetterà responsabilità per differenze in termini di colore o design che non siano dovute ad errori di produzione.*

Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS con finitura gofrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l'ossidazione rotante a 350° su cuscinetto a sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo, carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza.

Tappezzeria, realizzata in PVC 2 mm integrale anallergico e autoestinguente e disponibile in versione mono o bicolore.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano.
Inserto interno allo schienale e alla seduta in legno

Braccioli abbattibili.

Funzione "SAFETY STOP" attivabile dal paziente e dall'operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione "lettino" con schienale, seduta, gambaiera/e e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale.



altezza minima del sedile: 540 mm
altezza massima del sedile: 940 mm
inclinazione delle gambiere: 90°
inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)
inclinazione longitudinale della poltrona (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico
altezza massima dell'estremità della gambaiera: 1300 mm
peso della poltrona: 95 kg
carico nominale al sollevamento: 160 kg

PLEION_S

PLEION S è sempre in configurazione ambidestra.



Sollevamento verticale a pantografo
mediante attuatore elettrico



Pedale con cavo con pulsanti per la gestione dei movimenti della poltrona
Pulsante dedicato per il ritorno alla posizione "0".

Modelli Pleion S disponibili:

3926700	PLEION S con doppia gambiera meccanica (2 motori) Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema <u>Extra Slide</u> (250 mm di escursione)
----------------	---

Optional:

3916030	Tappezzeria in versione bicolore
----------------	----------------------------------



AGIRE SULLA LEVA DI
METALLO PER ABBASSARE
LE GAMBIERE

PLEION_S

Le poltrone SMD Stern Podia permettono l'accesso sia frontale che laterale.

L'accesso laterale nella poltrona Pleion S è garantito dalla possibilità di abbattere e bloccare in posizione bassa i braccioli.



POLTRONE:

Dispositivi medici di Classe I



Struttura interamente in acciaio trattato contro l'ossidazione




Boccole in plastica autolubrificante

Schede elettroniche made in Italy



Base anti-ribaltamento

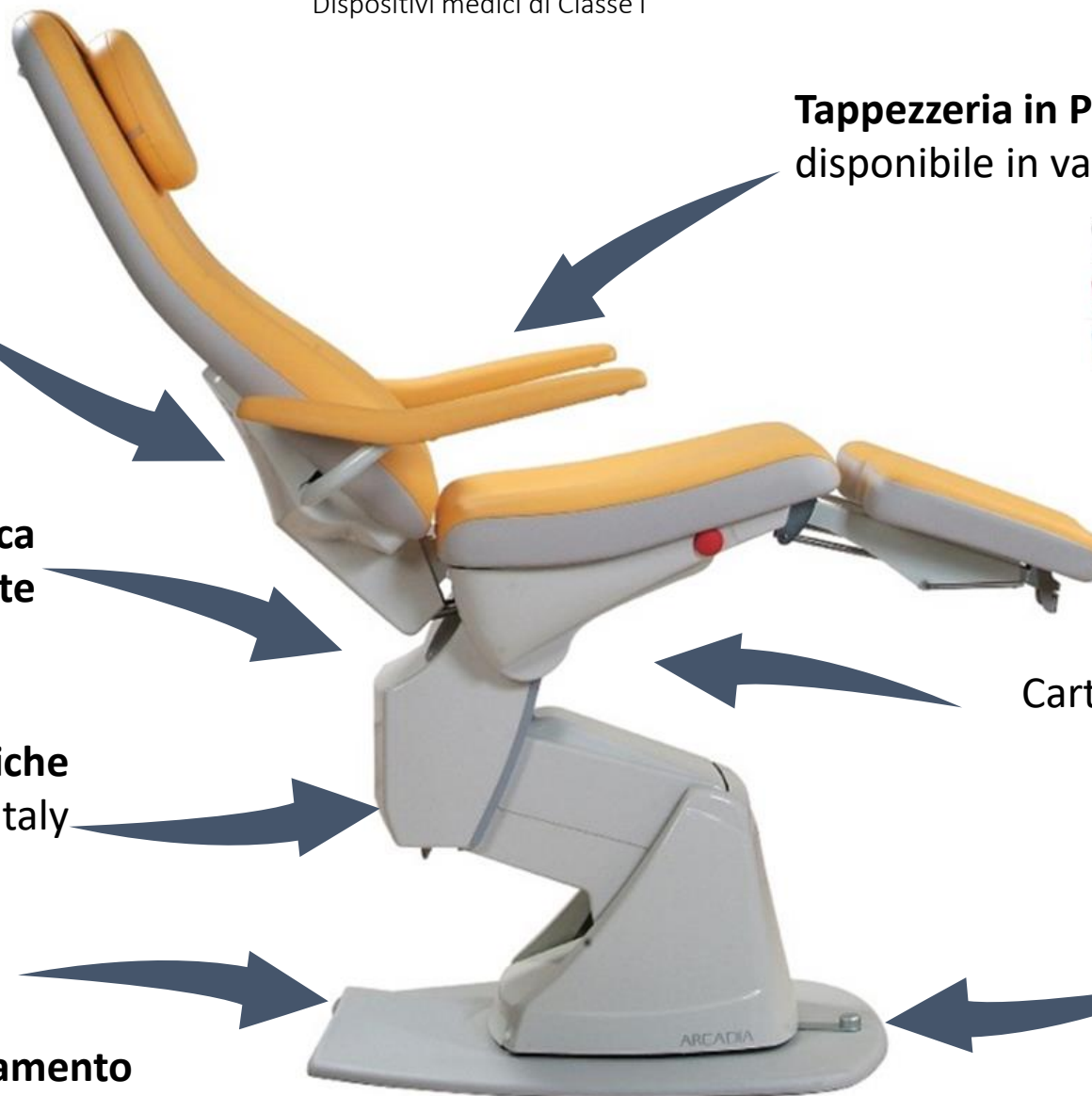

Tappezzeria in PVC 2 mm integrale disponibile in vari colori



Carterature in ABS+PMMA

Struttura rotante a 350°

PROXIMA**Wireless Single Touch Pedal:**

3 memories + return to 0 position
Electric brake system

ARCADIA**Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

PLEION X**Pedale Wireless Single Touch:**

3 memorie + ritorno alla posizione 0

PLEION S**Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

LYRA**Pedale con cavo:**

Ritorno automatico alla posizione 0

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Carico nominale al sollevamento
190 Kg

Carico nominale al sollevamento
160 Kg

Carico nominale al sollevamento
200 Kg

Altezza seduta:
min 46 cm / max 91 cm

Altezza seduta:
min 51 cm / max 89 cm

Altezza seduta:
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta:
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta:
min 48,5 cm / max 69 cm

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 142

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 134

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 130

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 130

**Altezza massima dell'estremità
della gamba:** cm 105

Possibilità tappezzeria bicolore

Possibilità tappezzeria bicolore

Possibilità tappezzeria bicolore

**Possibilità tappezzeria bicolore
OPZIONALE**

**Possibilità tappezzeria bicolore
OPZIONALE**

	PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Numero dei motori	Da 2 a 5	3	2	2	2
Movimenti	3 motorizzati o 2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	3 motorizzati 	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 	2 motorizzati + 1 manuale (schienale) 
Movimento verticale a pantografo 	X	X	X	X	X
Schiuma iniettata in uno stampo, spessore della seduta differenziato ergonomicamente. Inserto interno dello schienale e della seduta in acciaio.	X	X	-	-	-
Spessore costante di 4 cm di gomma piuma.	-	-	X	X	X
Rotazione 350° Freno elettrico a pedale 	X	-	-	-	-
Rotazione 350° Freno di rotazione ad effetto progressivo tramite leva a pedale. 	-	X	X	X	-
Sistema di Sicurezza attivabile dal paziente (bottoni rossi posti ai lati della seduta) 	X	X	X	X	-

		PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Braccioli montati direttamente sullo schienale per garantire un accesso laterale alla seduta della poltrona completamente libero da ostacoli.		X	X	-	-	-
Braccioli coassiali ad altezza variabile rispetto alla seduta, in sincronia con l'inclinazione dello schienale.		X	X	-	-	-
Braccioli sollevabili, anche separatamente, in modo semplice e intuitivo.		X	-	-	-	-
Braccioli entrambi abbattibili		-	-	X	X	X
Extra Slide System: 35 cm		X	-	-	-	-
Extra Slide System: 25 cm		-	X	X	X	-

		PROXIMA	ARCADIA	PLEION X	PLEION S	LYRA
Gambiere divaricabili con ampiezza angolare di 30°+30°, (ideale per la salita e discesa di pazienti anziani e con difficoltà di movimento)		X	X	X	X	X
Doppia gambiera manuale (movimentabile con molla a gas)		X	-	-	-	-
Doppia gambiera manuale		-	X	X	X	X
Doppia gambiera motorizzata		X	-	-	-	-
Gambiera unica motorizzata		X	-	-	-	-

Cortina in PVC




ASPI-COMP Motore d'aspirazione con braccio

Motore d'aspirazione ad induzione ASPI-COMP con carenatura insonorizzante in acciaio verniciato con polvere epossidica, silenziatore, interruttore generale, fusibili. Filtro con indicatore di saturazione incluso
Aria aspirata 60m³/h



Lampada SUN LED con braccio articolato e compensato

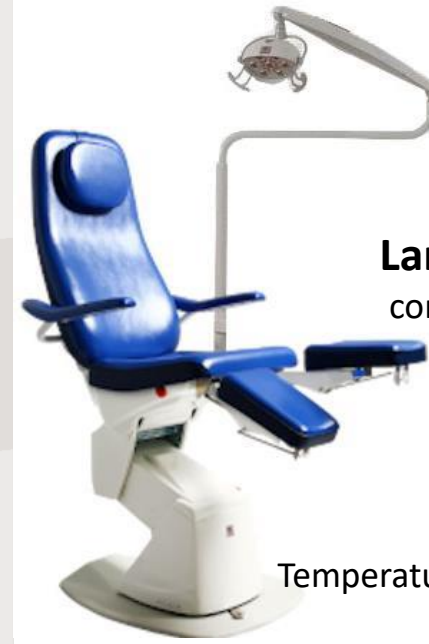

7 led da 3W
(utilizzati al 70%)
Temperatura del colore 6.300K
Alimentazione 24V
Assorbimento 15W complessivi

Accessori poltrone podologiche




**Kit 2 vaschette
per gambiere**

**Protezione gambiere in
tessuto lavabile**
(colore bianco)



Memory foam

Aggiunta di uno strato di schiuma memory
alla normale imbottitura della tappezzeria

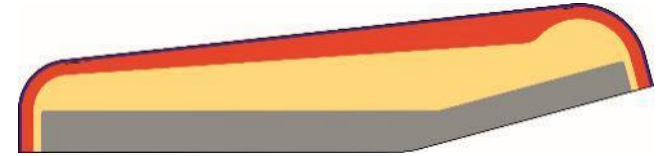

Accessori poltrone podologiche



STERN PODIA 



STERN PODIA 



S.M.D. Srl

Via Bruno Buozzi, 41 40057 CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
tel. +39 051766143 fax +39 051 766043 www.smdmed.com

STERN PODIA 

P.IVA IT 02195391202 C.F./Reg.Imprese BO 02195391202 REA n.419949 Capitale sociale euro 50.000 i.v.